

# Aoralscan Lync

Intraoral Scanner

**Escaneamento  
Inteligente**



PT

[SHINING3DDENTAL.COM](http://SHINING3DDENTAL.COM)

# Ergonômico e Fácil Manuseio

Aoralscan Lync é o mais recente scanner intraoral da SHINING 3D, construído sobre a tecnologia e qualidade comprovadas da série Aoralscan. Com software e hardware potentes, ele é desenvolvido para priorizar eficiência e desempenho. Suporta diversas aplicações clínicas, incluindo implantologia, ortodontia e prótese.



## Excelente Design

Ergonômico, semelhante a uma caneta, permite o escaneamento de modo intuitivo e fácil de usar.




## Formato Leve

Com apenas 116g, seu design compacto e leve garante a utilização sem interrupções, mesmo em procedimentos prolongados.



## Conexão Simplificada

Conexão Tipo-C, plug-and-play, que otimiza o uso.

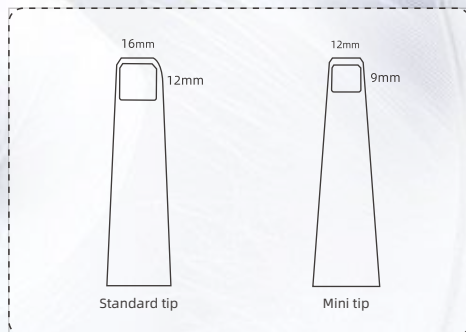



Slim

116<sub>g</sub>

# Excelente Desempenho de Escaneamento

Experimente o poder de um escaneamento que combina velocidade, precisão e profundidade, projetado para fluxos de clínicos complexos. O Aoralscan Lync fornece dados de escaneamento precisos e de alta qualidade.



## Fluxo de Escaneamento

alta velocidade de escaneamento e experiência de uso.



## Precisão

Algoritmo otimizado e imagem aprimorada fornecem precisão e detalhes para várias aplicações, garantindo resultados precisos em todo o fluxo clínico.



## Profundidade de Escaneamento

Profundidade de campo de até 22mm permite capturar facilmente cavidades e espaços.




# Experiência de Escaneamento

Desenvolvido para atuação clínica, o Aoralscan Lync oferece um fluxo de trabalho de intuitivo.



## Interface Intuitiva

interface simplificada garante um processo de escaneamento mais eficiente e contínuo.

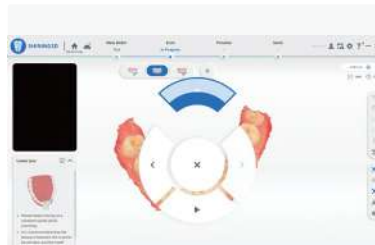


## Controle por Movimento

Permite controle sem contato durante o escaneamento, otimizando o escaneamento.

# Software Inteligente

Software avançado SHINING 3D, o Aoralscan Lync fornece uma experiência de escaneamento inteligente e simplificada.

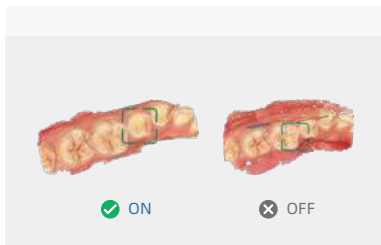


## Escaneamento Inteligente

Software conta com IA, removendo automaticamente a interferência de tecidos moles para captura de dados limpos e precisos.



## Indicador de Qualidade

Destaca áreas com falta de dados em cinza, ajudando a identificar onde re-escanear para obter maior qualidade.

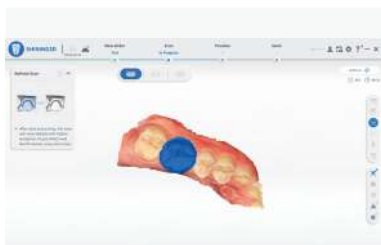

## Escaneamento Refinado

Captura detalhes finos de morfologia e preparação com alta qualidade.




## Superfícies Metálicas

Escaneia efetivamente restaurações metálicas e tons mais escuros.

# Recursos para Excelência Clínica

## Scanbodies

Bibliotecas internas de principais marcas de scanbodies permitem alinhamento preciso com um clique durante o escaneamento, minimizando alterações e simplificando o fluxo de restauração de implante.

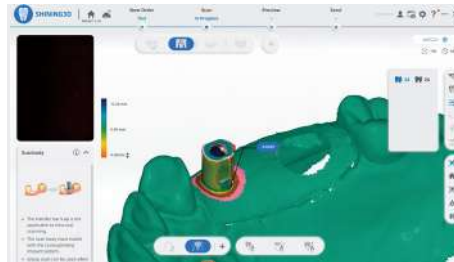

## Detecção de Mordida

Visualiza os contatos oclusais com mapa de calor e vista seccional, apoiando dentistas a avaliar relações de mordida de forma eficiente.



## Exportação em Formato Aberto para Design

Exporta facilmente dados em diversos formatos suportados para integração perfeita com software CAD como exocad, garantindo design de prótese.



# Design Service SHINING 3D

Um componente essencial das Soluções Completas SHINING 3D é o Serviço de Design, que oferece soluções personalizadas, desde próteses até coroas sobre implantes e guias cirúrgicos.

Pelo próprio software, os usuários do Aoralscan Lync podem se conectar diretamente à plataforma SHINING 3D Dental Cloud, facilitando o acesso ao serviço e garantindo uma integração fluida ao fluxo clínico digital.

## Categorias de Design

A SHINING 3D oferece soluções completas para Prótese, Implantes, Ortodontia e Prótese Total, atendendo a todas as necessidades da odontologia

## Fluxo de Trabalho Contínuo

Do escaneamento ao design, fatiamento na nuvem e impressão 3D, a SHINING 3D oferece um fluxo integrado e para você e seus pacientes.

## Entrega Rápida


Receba os resultados em 2 a 4 horas com o serviço expresso. Pedidos padrão são entregues em até 1 dia.

## Verificação de Modelos 3D

Verifique os designs com ferramentas avançadas, incluindo medição de espessura, detecção de oclusão e muito mais.



Scan the QR code  
to view video

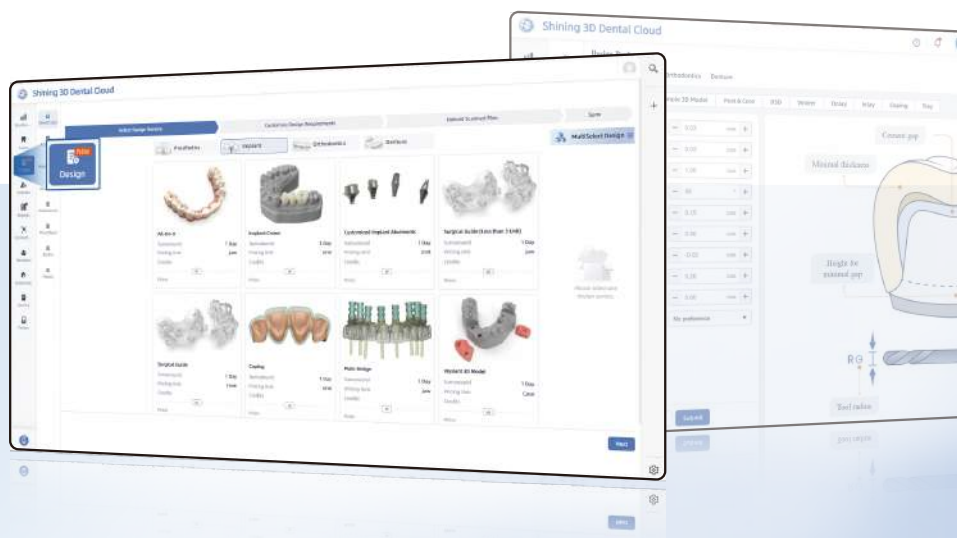

# Especificações Técnicas

## Aoralscan Lync

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Campo de varredura        | Ponteira padrão: 16 × 12 × 22 mm<br>ponteira pequena: 12 × 9 × 22 mm |
| Princípio de escaneamento | Scanner sem contato com luz estruturada                              |
| Dimensões (C × L × A)     | 245mm × 38mm × 33 mm                                                 |
| Peso                      | 116 g (sem cabo)                                                     |
| Formatos de saída         | STL, OBJ, PLY                                                        |
| Porta de conexão          | Type-C                                                               |
| Entrada de energia        | 12V DC/ 3A                                                           |

### Configuração Recomendada do PC

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Processador (CPU)             | Intel Core i7-8700 ou superior                      |
| Memória RAM                   | Recomendado: 32 GB                                  |
| Armazenamento                 | SSD de 256 GB ou superior                           |
| Placa de vídeo (GPU)          | NVIDIA RTX 2060 com 6 GB ou superior                |
| Sistema operacional           | Windows 10 Professional (64 bits) ou mais recente   |
| Versão do sistema operacional | Versões de 64 bits do Windows                       |
| Portas de entrada/saída (I/O) | 1 porta USB Tipo-C @ 3.0A (5V, 3A) e 1 porta Tipo-A |
| Portas USB                    | USB 3.0 ou superior                                 |

