

vigodent

Adsil

Silicone
de Adição

Conheça o seu **Silicone de Adição** com nanotecnologia para moldagens clínicas de alta precisão com um ótimo custo-benefício.



Adsil

O **Silicone de Adição** com nanotecnologia para moldagens clínicas de alta precisão.

Tudo isso com um ótimo custo-benefício.

Alta precisão.
Cores vivas.
Resistência.
Estabilidade.
Custo-benefício.



Adsil e suas versões:



Putty Soft

Tempo de Mistura

0' 30"

Tempo de Presa

3'30"

Reprodução de detalhe

75 µm



Cartucho Regular Body e Light Body

0' 10"

3'30"

20 µm



Bisnaga Regular Body e Light Body

0' 30"

3'30"

20 µm

*O tempo de presa mencionado acima leva em consideração a temperatura ambiente e a umidade normal do ar. O tempo de presa pode variar de acordo com temperaturas diferentes. (Como se fosse de marcação)

**Precisão e estabilidade na moldagem**

Moldagens extremamente estáveis permitindo maior tempo para vazamento.

**Cores vivas e contrastantes**

Facilita a visualização de margens e detalhes anatômicos.

**Tecnologia High Definition Xtreme (HDX)**

Permitindo uma extrema reprodução de detalhes.

**Extremamente fluido e tixotrópico**

Flui com facilidade e permanece estável após aplicado, evitando escorrimento.

**Alta resistência ao rasgamento**

Sem falhas durante a remoção da moldagem da boca. Livre de bolhas. Evitando retrabalho.

**Testado conforme padrões internacionais de qualidade**


Assegurando qualidade e confiabilidade em uso clínico



Economia inteligente com Adsil

A ponteira misturadora do **Adsil** conta com um design de comprimento reduzido, que **proporciona até 40% de economia de material** em cada aplicação, quando comparada às ponteiros helicoidais convencionais.

Sua tecnologia avançada garante uma mistura eficiente, homogênea e livre de bolhas otimizando o uso do material.

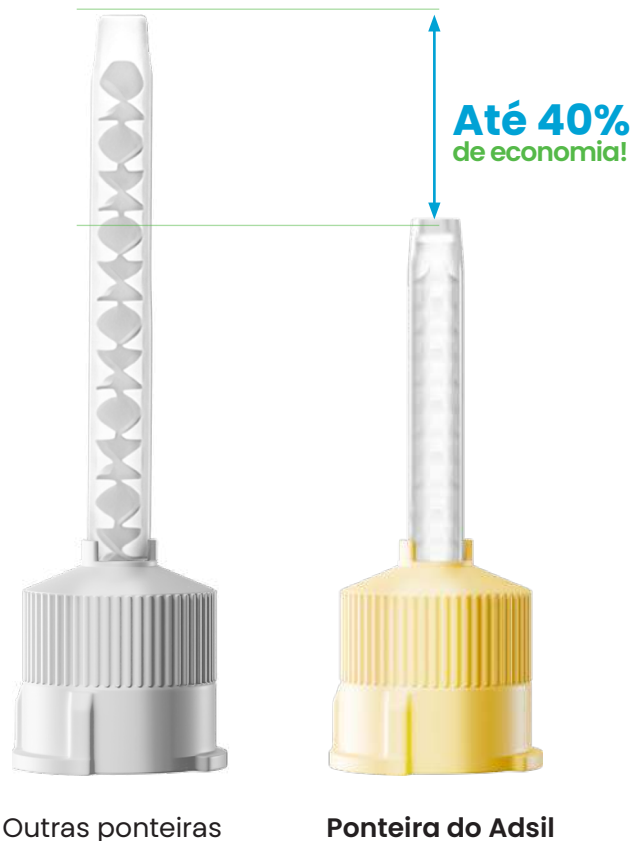

Acompanha acessório Intraoral*

*Consulte a apresentação específica do Adsil que acompanha a ponteira.



- Mais precisão na aplicação
- Encaixe perfeito na ponteira

How To Use : Adsil



Acesse o link



How To Use : Adsil Single Dose



Acesse o link



Adsil

Single Dose
Putty soft

Mais aproveitamento,
menos desperdício

Dose exata*, sem
desperdício.

Maior biossegurança

Mais economia,
mais segurança.



Versão em dose única



Dispensador prático

*1 saché (base+cat) atende uma moldagem completa sem palato.

Moldagem precisa sem complicação.

1º Passo


Abra o sachê



Corte a embalagem para liberar o putty e o catalisador, que já vêm na medida certa.

2º Passo

Misture para obter uma massa homogênea

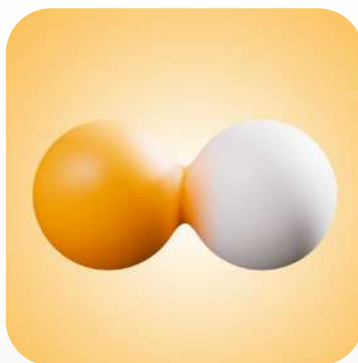

Com luvas* (não devem ser luvas de látex), misture os dois componentes por 30 segundos obtendo uma cor uniforme.

*Nitrílicas (sem enxofre) ou vinil

3º Passo

Realize a moldagem



Transfira a massa para a moldeira desejada imediatamente e leve a boca do seu paciente.

4º Passo

Pronto!



Agora você tem uma moldagem precisa, sem desperdício.



Wild Citrus:

Presente no Adsil Putty Soft, o aroma Wild Citrus transforma a sua moldagem e a experiência do seu paciente em algo agradável e confortável.




Conheça a tecnologia HDX



A exclusiva tecnologia HDX (High Definition Xtreme) presente no Adsil é um diferencial que potencializa resultados clínicos superiores garantindo maior fidelidade e estabilidade de cópia. Ela se destaca por quatro pilares principais:

1. Cores Contrastantes

As cores vivas e contrastantes facilitam a leitura visual de margens e detalhes anatômicos, auxiliando o profissional durante o procedimento e na conferência da moldagem.

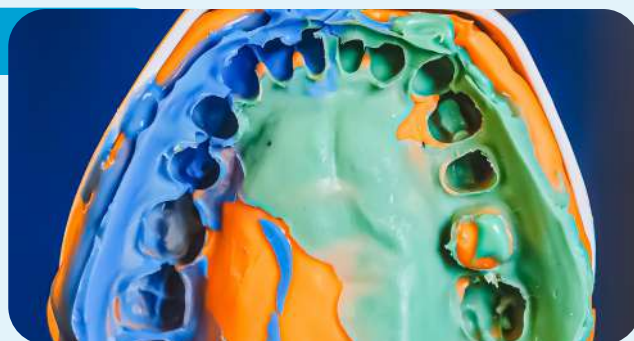

2. Estabilidade Dimensional

A composição do material, enriquecida com nanopartículas, proporciona moldagens extremamente fiéis e estáveis, mesmo após a remoção, o que é essencial para a precisão em próteses e restaurações.



3. Resistência Mecânica

A tecnologia HDX garante alta resistência ao rasgamento, especialmente importante em regiões de sulcos finos e áreas mais delicadas da cavidade oral, evitando falhas durante a remoção da moldagem.



4. Reprodução de Detalhes Fina

Sua ótima tixotropia possibilita uma reprodução ultradetalhada, capturando sulcos e margens com altíssima definição mesmo em ambientes úmidos graças à sua hidrofília.



Essa tecnologia torna o Adsil **indicado para moldagens de alta exigência**, como:



Coroas



Próteses sobre implantes



Preparos múltiplos

Mantendo fidelidade e confiabilidade durante todo o processo.

+ Sobre Adsil

Recuperação elástica

Maior que 96,6 % – Praticamente sem distorção

Resistência ao rasgamento

Protege detalhes finos

Hidrofilia

Funcional em ambiente úmido

Precisão/detalhamento

Tecnologia HDX para uma excelente reprodução

Consistência

LB: Tipo 3 | RB: Tipo 2

Fluído e Tixotrópico

A fluidez e a tixotropia do Adsil permitem que o material alcance áreas difíceis com precisão e permaneça estável após a aplicação. Isso garante moldagens detalhadas, sem escorrimientos, com controle e confiabilidade ideais para resultados clínicos superiores.

Diferentes formas de apresentação:

Regular Body Cartucho (RB)



1 un.

Cartucho com 50ml
(25ml de base
+ 25ml de catalisador)



6 un.

Ponteiras
misturadoras



2 un.

Ponta
intraoral

Light Body Cartucho (LB)



1 un.

Cartucho com 50ml
(25ml de base
+ 25ml de catalisador)



6 un.

Ponteiras
misturadoras



2 un.

Ponta
intraoral

Regular Body Bisnaga (RB)



1 un.

Bisnaga base com 53ml

1 un.

Bisnaga catalisador com 53ml

Light Body Bisnaga (LB)



1 un.

Bisnaga base com 53ml

1 un.

Bisnaga catalisador com 53ml

Putty Soft



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Putty Soft: Single Dose



Caixa dispensadora



20 un.

Sachê duplo:
Base 17,5 g e Catalisador 17,5 g

Kit Putty Soft Regular Body (RB) Duplo

Regular Body (RB)



Putty Soft



2 un.

Cartucho com 50ml
(25mL de base
+ 25mL de catalisador)



6 un.

Ponteiras
misturadoras



2 un.

Ponta
intraoral



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Kit Putty Soft Light Body (RB) Duplo

Light Body (RB)



Putty Soft



2 un.

Cartucho com 50ml
(25mL de base
+ 25mL de catalisador)



6 un.

Ponteiras
misturadoras



2 un.

Ponta
intraoral



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Kit Putty Soft Regular Body (RB) Único

Regular Body (RB)



Putty Soft



1 un.

Cartucho com 50ml
(25mL de base
+ 25mL de catalisador)



3 un.

Ponteiras
misturadoras



2 un.

Ponta
intraoral



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Kit Putty Soft Light Body (RB) Único

Light Body (RB)



Putty Soft



1 un.

Cartucho com 50ml
(25mL de base
+ 25mL de catalisador)



3 un.

Ponteiras
misturadoras



2 un.

Ponta
intraoral



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Kit Putty Soft Regular Body (RB) Duplo

Regular Body (RB)



Putty Soft

1 un.

Bisnaga base com 53ml



1 un.

Bisnaga catalisador com 53ml



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Kit Putty Soft Light Body (RB) Duplo

Light Body (RB)



Putty Soft

1 un.

Bisnaga base com 53ml



1 un.

Bisnaga catalisador com 53ml



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



2 un.

Colher medidora

Kit Putty Soft Light Body (RB) Duplo

Light Body (RB)



Putty Soft

2 un.

Cartucho com 50ml
(25ml de base
+ 25mL de catalisador)



2 un.

Ponta intraoral



1 un.

Pote de base com 400g



1 un.

Pote de catalisador com 400g



6 un.

Ponteiras
misturadoras



1 un.

Pistola dispensadora



2 un.

Colher medidora



Encontre-nos nas mídias sociais:



Contato:

(21) 3865-5600 | vigodent@vigodent.com.br | www.vigodent.com.br
Rua da Assembleia, 66 , 7 Andar – Centro – 20011-000 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil