

ALLURMEDICAL[®]



MEDIA KIT

CRISTALINE

Cristaline

Seringa de Alta Transparência



81676079003

A CRISTALINE é uma seringa ZERO RESÍDUO, sem agulha, indicada principalmente para medicina estética (mesoterapia ou intradermoterapia e aplicação de Toxina Botulínica) e procedimentos odontológicos. É ideal também para procedimentos realizados na neurorradiologia, neonatal, angiologia, pediatria e outros procedimentos em conformidade com as normas ISO.

A seringa CRISTALINE possui capacidade de até 1ml e bico Luer Lock. Desenvolvida com cilindro em cristal policarbonato de ALTA TRANSPARÊNCIA, apresenta adaptador de transferência, permitindo unir duas seringas Luer Lock ou outros dispositivos Luer Lock para facilitar a transferência de fluídos. Permite uma melhor distribuição da pressão aplicada, para total controle no manuseio e maior precisão na aplicação.

Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, é atóxica, livre de látex e esterilizada por Gás Óxido de Etileno.

A seringa CRISTALINE é um produto seguro, de uso único, com certificado INMETRO e devidamente registrado na ANVISA. Deve ser utilizada apenas por profissional habilitado e capacitado.

DIFERENCIAIS



Zero resíduo: Ideal para uma aplicação sem desperdício.

Alta transparência: Cilindro em cristal policarbonato com capacidade de 1 ml.

Adaptador de transferência: Praticidade para a transferência de fluídos.

Atóxica e livre de látex: Minimiza o risco de reação alérgica.

Produto estéril: Embalada individualmente e esterilizada por Gás Oxido Etileno.

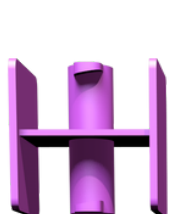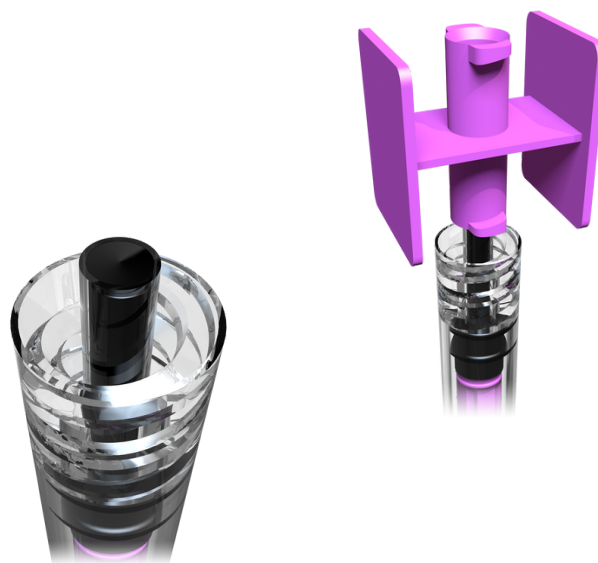

CAIXA COM 25 UNIDADES

ALTURA: 16CM
LARGURA: 16CM

PROFUNDIDADE: 9CM
PESO: 290G

ALUR MEDICAL®

 (51) 3939 - 4330 |  (51) 99232-2112

Rua Joaquim Pedro Soares, nº 959
Bairro Guarani, Novo Hamburgo - RS
www.alur.com.br | alure@alur.com.br

 /alurmed

 @alurmedical