

CATÁLOGO



SINGULAR
Implants

Ser Singular
para Transformar

 **HENRY SCHEIN®** | 
DENTAL

www.singularimplants.com.br

GLOBAL

ÍNDICE

IMPLANTES	03
COMPONENTES	16
KITS SINGULAR	25



IMPLANTES

ÍNDICE IMPLANTES

CONE MORSE	05
HEXÁGONO EXTERNO	08
HYBRIDUS®	10



IMPLANTES SINGULAR

O MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os Implantes da Singular são produzidos em titânio grau 4 (ASTM F67) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

MÁXIMA PRECISÃO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e controle de qualidade rigoroso.

VERSATILIDADE

Os implantes Singular permitem a colocação em todos os tipos de condições e ossos.

ALTA OSSEOINTEGRAÇÃO

Superfície que permite alta osseointegração promovida por um duplo ataque ácido.

Osseointegração de 06 a 08 semanas.



CONE MORSE CÔNICO

TAMANHOS	MODELO CÓDIGO
3.5 X 8	100.377
3.5 X 10	100.378
3.5 X 11,5	100.379
3.5 X 13	100.183
3.5 X 16	100.381
3.75 X 7	100.185
3.75 X 9	100.186
3.75 X 11	100.187
3.75 X 13	100.188
3.75 X 15	100.189
4.0 X 7	100.191
4.0 X 9	100.192
4.0 X 11	100.193
4.0 X 13	100.194
4.0 X 15	100.195
4.3 X 8	100.388
4.3 X 10	100.389
4.3 X 11,5	100.390
4.3 X 13	100.391
4.3 X 16	100.392
5.0 X 8	100.400
5.0 X 10	100.401
5.0 X 11,5	100.402
5.0 X 13	100.403
5.0 X 16	100.404



CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

Sequência de Brocas Cônicas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	3.5	3.5+ ^{MAX}	4.3	5.0
3.5	•	•	•	•			
3.75	•	•	•	•	•		
4.0	•	•	•	•	•		
4.3	•	•	•	•		•	
5.0	•	•	•	•		•	•

*Conforme planejamento cirúrgico



PERFURAÇÃO 500/800 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



CONE MORSE CILÍNDRICO

TAMANHOS	MODELO CÓDIGO
3.5 X 7	100.110
3.5X9	100.111
3.5 x 11	100.112
3.5 X 13	100.113
3.5 X 15	100.114
3.75X7	100.115
3.75X9	100.116
3.75X11	100.117
3.75 X13	100.319
3.75 X15	100.320
4.0 X 7	100.121
4.0 X 9	100.122
4.0X11	100.123
4.0 X 13	100.124
4.0 X 15	100.125
5.0 X 7	100.133
5.0 X 9	100.134
5.0 X 11	100.135
5.0 X 13	100.136
5.0 X 15	100.137



CARACTERÍSTICAS

- Implante Cilíndrico com rosca dupla, ápice cônico e conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas
- Pode ser usado tanto para maxila quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica.
- Implante para osso compacto ou poroso
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

Sequência de Brocas Cilíndricas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	2.8	3.0	3.3	4.3
3.5	•	•	•	•			
3.75	•	•	•	•	•		
4.0	•	•	•	•	•	•	
5.0	•	•	•	•	•	•	•



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N,CM




PERFURAÇÃO 500/800 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N,CM



CONE MORSE GO DIRECT

TAMANHOS	MODELO CÓDIGO
3.5 X 8	100.083
3.5 X 10	100.086
3.5 X 11.5	100.087
3.5 X 13	100.082
3.5 X 16	100.081
4.3 X 8	100.088
4.3 X 10	100.089
4.3 X 11.5	100.090
4.3 X 13	100.091
4.3 X 16	100.092
5.0 X 8	100.093
5.0 X 10	100.094
5.0 X 11.5	100.095
5.0 X 13	100.096
5.0 X 16	100.097

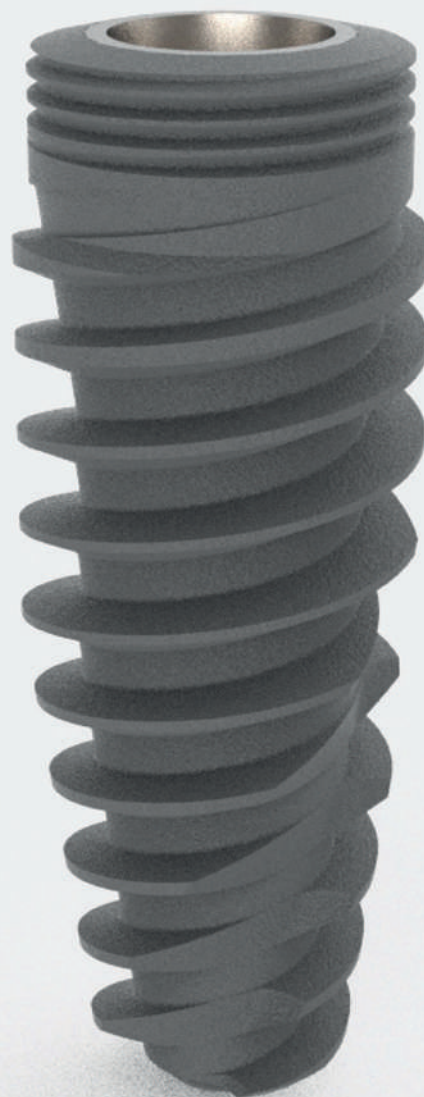

CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com rosca dupla e conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Ângulo interno 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Indicado para osso tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas.
- Pode ser usado tanto para maxila quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Indicado para pós extração e carga imediata
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

Sequência de Brocas Cônicas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	3.5	3.5+ ^{MAX}	4.3	5.0
3.5	•	•	•	•	•		
4.3	•	•	•	•		•	
5.0	•	•	•	•		•	•

*Conforme planejamento cirúrgico

III	IV	PERFURAÇÃO	500/800 RPM
		INSERÇÃO	30 RPM
		TORQUE MÁXIMO	60 N.CM



HE CÔNICO

TAMANHOS	MODELO CÓDIGO	PLATAFORMA
3.5 X 8	100.409	HEX2.36
3.5 X 10	100.410	HEX2.36
3.5 X 11.5	100.411	HEX2.36
3.5 X 13	100.412	HEX2.36
3.5 X 16	100.413	HEX2.36
3.75 X 7	100.221	4.1 UNIV.
3.75 X 9	100.222	4.1 UNIV.
3.75 X 11	100.223	4.1 UNIV.
3.75 X 13	100.224	4.1 UNIV.
3.75 X 15	100.225	4.1 UNIV.
4.0 X 7	100.227	4.1 UNIV.
4.0 X 9	100.228	4.1 UNIV.
4.0 X 11	100.229	4.1 UNIV.
4.0 X 13	100.230	4.1 UNIV.
4.0 X 15	100.231	4.1 UNIV.
4.3 X 8	100.427	4.1 UNIV.
4.3 X 10	100.428	4.1 UNIV.
4.3 X 11.5	100.429	4.1 UNIV.
4.3 X 13	100.430	4.1 UNIV.
4.3 X 16	100.431	4.1 UNIV.
5.0 X 8	100.439	4.1 UNIV.
5.0 X 10	100.440	4.1 UNIV.
5.0 X 11.5	100.441	4.1 UNIV.
5.0 X 13	100.442	4.1 UNIV.
5.0 X 16	100.443	4.1 UNIV.



CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cônico
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção Nível Ósseo
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Implante para diversas situações clínicas
- Indicado para osso tipo III e IV
- Pode ser usado tanto para maxila quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**


Sequência de Brocas Cônicas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	3.5	3.5+ MAX*	4.3	5.0
3.5	•	•	•	•			
3.75	•	•	•	•	•		
4.0	•	•	•	•	•		
4.3	•	•	•	•		•	
5.0	•	•	•	•		•	•

*Conforme planejamento cirúrgico

HE PLATAFORMA 3.3
HEXÁGONO EXTERNO 2.36MM
ROSCA INTERNA: M 1.8

HE PLATAFORMA 4.1
HEXÁGONO EXTERNO 2.70MM
ROSCA INTERNA: M 2.0

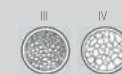

PERFURAÇÃO 500/800 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



HE CILÍNDRICO

TAMANHOS	MODELO CÓDIGO	PLATAFORMA
100.139	3.3 X 7	HEX2.36
100.140	3.3 X 9	HEX2.36
100.141	3.3 X 11	HEX2.36
100.142	3.3 X 13	HEX2.36
100.143	3.3 X 15	HEX2.36
100.151	3.75 X 7	4.1 UNIV.
100.152	3.75 X 9	4.1 UNIV.
100.153	3.75 X 11	4.1 UNIV.
100.154	3.75 X 13	4.1 UNIV.
100.155	3.75 X 15	4.1 UNIV.
100.157	4.0 X 7	4.1 UNIV.
100.158	4.0 X 9	4.1 UNIV.
100.159	4.0 X 11	4.1 UNIV.
100.160	4.0 X 13	4.1 UNIV.
100.161	4.0 X 15	4.1 UNIV.
100.169	5.0 X 7	4.1 UNIV.
100.170	5.0 X 9	4.1 UNIV.
100.171	5.0 X 11	4.1 UNIV.
100.172	5.0 X 13	4.1 UNIV.
100.173	5.0 X 15	4.1 UNIV.

HE PLATAFORMA 3.3
HEXÁGONO EXTERNO 2.36MM
ROSCA INTERNA: M 1.8

HE PLATAFORMA 4.1
HEXÁGONO EXTERNO 2.70MM
ROSCA INTERNA: M 2.0



CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cilíndrico com rosca dupla
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção Nível Ósseo
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Implante para diversas situações clínicas
- Indicado para osso tipo I, II, III e IV
- Pode ser usado tanto para maxila quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

Sequência de Brocas Cilíndricas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	2.8	3.0	3.3	4.3
3.5	●	●	●	●			
3.75	●	●	●	●	●		
4.0	●	●	●	●	●	●	
5.0	●	●	●	●	●	●	●



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



PERFURAÇÃO 500/800 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



NOVIDADE

HYBRIDUS® CM

IMPLANTE	MODELO CÓDIGO
CM 3.5 X 8	100.705
CM 3.5 X 10	100.706
CM 3.5 X 11,5	100.707
CM 3.5 X 13	100.708
CM 3.5 X 15	100.709
CM 3.8 X 8	100.710
CM 3.8 X 10	100.711
CM 3.8 X 11,5	100.712
CM 3.8 X 13	100.713
CM 3.8 X 15	100.714
CM 4.3 X 8	100.715
CM 4.3 X 10	100.716
CM 4.3 X 11,5	100.717
CM 4.3 X 13	100.718
CM 4.3 X 15	100.719



CARACTERÍSTICAS

- Implante com conexão Cone Morse
- Macrogeometria desenhada para carga imediata em qualquer condição óssea
- BioFusion®: Uma superfície com poder hidrofílico que promove osseointegração entre 4 e 5 semanas
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Indicado para todos os tipos de ossos
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10Ncm

Sequência de Brocas Cônicas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	3.5	3.5+ ^{MAX}	4.3	5.0
3.5	•	•	•	•			
3.8	•	•	•	•	•		
4.3	•	•	•	•		•	

*Conforme planejamento cirúrgico



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



PERFURAÇÃO 500/800 RPM
INSERÇÃO 30 RPM
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



NOVIDADE

HYBRIDUS® HE

IMPLANTE	MODELO CÓDIGO
HE 3.5 X 8 - PLATAFORMA 4.1	100.720
HE 3.5 X 10 - PLATAFORMA 4.1	100.721
HE 3.5 X 11,5 - PLATAFORMA 4.1	100.722
HE 3.5 X 13 - PLATAFORMA 4.1	100.723
HE 3.5 X 15 - PLATAFORMA 4.1	100.724
HE 3.8 X 8 - PLATAFORMA HE 4.1	100.725
HE 3.8 X 10 - PLATAFORMA HE 4.1	100.726
HE 3.8 X 11,5 - PLATAFORMA HE 4.1	100.727
HE 3.8 X 13 - PLATAFORMA HE 4.1	100.728
HE 3.8 X 15 - PLATAFORMA HE 4.1	100.729
HE 4.3 X 8 - PLATAFORMA 4.1	100.730
HE 4.3 X 10 - PLATAFORMA 4.1	100.731
HE 4.3 X 11,5 - PLATAFORMA 4.1	100.732
HE 4.3 X 13 - PLATAFORMA 4.1	100.733
HE 4.3 X 15 - PLATAFORMA 4.1	100.734



CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cônico
- Macrogeometria desenhada para carga imediata em qualquer condição óssea
- BioFusion®: Uma superfície com poder hidrofílico que promove osseointegração entre 4 e 5 semanas
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção nível ósseo
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



INDICAÇÕES

- Indicado para todos os tipos de ossos
- Implante para diversas situações clínicas
- Pode ser usado tanto para maxila quando mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Torque máximo indicado para o Cover: 10Ncm

Sequência de Brocas Cônicas

	LANÇA	2.0	PILOTO OPCIONAL	3.5	3.5+ MAX	4.3	5.0
3.5	•	•	•	•			
3.8	•	•	•	•	•		
4.3	•	•	•	•		•	

*Conforme planejamento cirúrgico

I	II	PERFURAÇÃO	800/1200 RPM
		INSERÇÃO	30 RPM
		TORQUE MÁXIMO	60 N.CM

III	IV	PERFURAÇÃO	500/800 RPM
		INSERÇÃO	30 RPM
		TORQUE MÁXIMO	60 N.CM





COMPONENTES

ÍNDICE COMPONENTES

CONE MORSE	13
HEXÁGONO EXTERNO	21

CONE MORSE

MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

MELHOR PRECISÃO DO MERCADO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



CICATRIZADOR CONE MORSE



- Chave sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

TAMANHOS	MOD. Cód.
3,3 X 0.8	110.043
3,3 X 1.5	110.044
3,3 X 2.5	110.045
3,3 X 3.5	110.046
3,3 X 4.5	110.047
3,3 X 5.5	110.048
4,5 X 0.8	110.037
4,5 X 1.5	110.038
4,5 X 2.5	110.039
4,5 X 3.5	110.040
4,5 X 4.5	110.041
4,5 X 5.5	110.042

TRANSFER CONE MORSE



- Chave sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**
- Único componente para todos os diâmetros de implantes

DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CM	108.213
DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA CM	108.212

ANÁLOGO CONE MORSE



DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
ANÁLOGO CM N INDEXADO	101.030

PARAFUSO CONE MORSE



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
PARAFUSO BASE CAD CM N (1.8)	102.130

COVER CONE MORSE



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
COVER CM N	110.135

QUALIDADE



**SINGULAR
IMPLANTS**
UMA QUESTÃO
DE INTELIGÊNCIA



UCLA EM TITÂNIO CONE MORSE



INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

CONEXÃO/TAMANHO	MOD. CÓD.
Rotacional : 1.5mm	103.142
Rotacional : 2.5mm	103.143
Anti Rotacional : 0.8mm	103.131
Anti Rotacional : 1.5mm	103.132
Anti Rotacional : 2.5mm	103.133
Anti Rotacional : 3.5mm	103.134
Anti Rotacional : 4.5mm	103.135

UCLA EM CO-CR CONE MORSE



INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

CONEXÃO/TAMANHO	MOD. CÓD.
Rotacional : 0.8mm	103.079
Anti Rotacional : 0.8mm	103.119
Anti Rotacional : 1.5mm	103.120
Anti Rotacional : 2.5mm	103.121
Anti Rotacional : 3.5mm	103.122
Anti Rotacional : 4.5mm	103.123



SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA



MINI PILAR ANGULADO CONE MORSE



INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **20Ncm**

Angulação 17°

TAMANHOS	MOD. CÔD.
1.5	116.022
2.5	116.023
3.5	116.024

Angulação 30°

TAMANHOS	MOD. CÔD.
1.5	116.090
2.5	116.091
5.0	116.092

ANÁLOGO MINI PILAR



DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
ANÁLOGO MINI PILAR	101.006

CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD/CÔD.
CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR	115.001

CILINDROS



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO	109.045
CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO C/ PARAFUSO	109.046
CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO	109.014

MINI PILAR CONE MORSE



Ângulo reto

TAMANHOS	MOD. CÔD.
0.8	118.001
1.5	118.002
2.5	118.003
3.5	118.004
4.5	118.005
5.5	118.006

INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Instalação com Chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32Ncm**

PARAFUSO MINI PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD.COD.
PARAFUSO MINI PILAR	102.005

TRANSFER MINI PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR	108.207
DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR	108.208





PILAR TG CONE MORSE

INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Instalação com chave sextavada de 1,6
- Torque máximo indicado: 32 Ncm

TAMANHOS	MOD. CÓD.
0.8	118.058
1.5	118.059
2.5	118.018
3.5	118.019
4.5	118.020
5.5	118.021

ANÁLOGO PILAR TG



DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
ANÁLOGO PILAR TG	101.023

CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

MODELO	MOD. CÓD.
CAPA DE PROTEÇÃO TG	115.002

CILINDROS

- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm



DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
CILINDRO TG-TITÂNIO	109.042
CILINDRO PILAR TG CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL	109.041
CILINDRO CO-CRTG	109.043

PARAFUSO TG



DESCRIÇÃO	MOD. COD.
PARAFUSO TG	102.051

COMPATIBILIDADE



SINGULAR IMPLANTS

UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA

TRANSFER PILAR TG



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PILAR TG	108.211
DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PILAR TG	108.210



MICRO PILAR CONE MORSE



INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Indicado para pequenos espaços protéticos
- Instalação com chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32Ncm**

TAMANHOS	MOD. CÓD.
0,8	141.010
1.5	141.011
2.5	141.012
3.5	141.013
4.5	141.014
5.5	141.015

ANÁLOGO MICRO PILAR



DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
ANÁLOGO MICRO PILAR	101.097

CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR	115.020

CILINDROS



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO	109.131
CILINDRO MICRO PILAR CALCINÁVEL	109.132
CILINDRO CO-CR MICRO PILAR	109.133



CUSTO E BENEFÍCIO

SINGULAR IMPLANTES
UMA QUESTÃO
DE INTELIGÊNCIA

PARAFUSO MINI PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
PARAFUSO MINI PILAR	102.005

TRANSFER DO MICRO PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MICRO PILAR 3.8	108.209



PILAR UNIVERSAL CONE MORSE



Universal

INDICAÇÕES

- Para próteses cimentadas unitárias
- Instalação com chave sextavada 1.2
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

TAMANHOS	MOD. CÓD.
3.3 x4 - 0.8mm	119.013
3.3 x4 - 1.5mm	119.014
3.3 x4 - 2.5mm	119.015
3.3 x4 - 3.5mm	119.016
3.3 x4 - 4.5mm	119.017
3.3 x4 - 5.5mm	119.018
3.3 x6 - 0.8mm	119.019
3.3 x6 - 1.5mm	119.020
3.3 x6 - 2.5mm	119.021
3.3 x6 - 3.5mm	119.022
3.3 x6 - 4.5mm	119.023
3.3 x6 - 5.5mm	119.024

TAMANHOS	MOD. CÓD.
4.5 x4 - 0.8mm	119.001
4.5 x4 - 1.5mm	119.002
4.5 x4 - 2.5mm	119.003
4.5 x4 - 3.5mm	119.004
4.5 x4 - 4.5mm	119.005
4.5 x4 - 5.5mm	119.006
4.5 x6 - 0.8mm	119.007
4.5 x6 - 1.5mm	119.008
4.5 x6 - 2.5mm	119.009
4.5 x6 - 3.5mm	119.010
4.5 x6 - 4.5mm	119.011
4.5 x6 - 5.5mm	119.012

ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X4.0	101.017
ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X6.0	101.018
ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X4.0	101.019
ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X6.0	101.020

CONJUNTO MUNHÃO UNIVERSAL



Acompanha

- Transferente para moldagem
- Cilindro provisório
- Cilindro para fundição

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 4.0	103.214
CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 6.0	103.215
CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 4.0	103.216
CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 6.0	103.217

PERFORMANCE

SINGULAR
IMPLANTS

UMA QUESTÃO
DE INTELIGÊNCIA





PILAR UNIVERSAL CONE MORSE ANGULADO

Angulação 17°

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 1,5MM 17°	119.070
PILAR UNIVERSAL 3.3x4 2.5mm 17°	119.401
PILAR UNIVERSAL 3.3 X 4 3.5MM 17°	119.402
PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 1,5MM 17°	119.072
PILAR UNIV ANG 3.3 X 6.0 2.5MM 17°	119.073
PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 3,5MM 17°	119.071
PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 4.0 1.5 17°	119.076
PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 4.0 2.5MM 17°	119.074
PILAR UNIV ANG CM 4.5X4.0 3.5MM 17°	119.075
PILAR UNIV ANG CM 4,5X6,0 1,5MM 17°	119.078
PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 2.5MM 17°	119.080
PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 3.5MM 17°	119.077

INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Cimentada
- Instalação com chave protética de 1.2
- Torque máximo indicado: **20Ncm**

Angulação 30°

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 1,5MM 30°	119.082
PILAR UNIV ANG CM 3.3X4.0 2.5MM 30°	119.083
PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 3,5MM 30°	119.081
PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 1,5MM 30°	119.135
PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 2,5MM 30°	119.134
PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 3,5MM 30°	119.133
PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 1,5MM 30°	119.137
PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 2,5MM 30°	119.138
PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 3,5MM 30°	119.136
PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 1.5MM 30°	119.139
PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 2.5MM 30°	119.140
PILAR UNIV ANG CM 4.5X6.0 3.5MM 30°	119.425



SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA



HEXÁGONO EXTERNO

MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

MELHOR PRECISÃO DO MERCADO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



ANÁLOGO HEXÁGONO EXTERNO



TAMANHOS	MOD. CÓD.
Ø 3.3	101.001
Ø 4.1	101.002
Ø 5.0 - HEX 3.3	101.003
Ø 5.0 - HEX 2.70	101.008

CICATRIZADOR
HEXÁGONO
EXTERNO

TAMANHOS	MOD. CÓD.
3,3 X 2.0	110.001
3,3 X 3.0	110.002
3,3 X 4.0	110.003
3,3 X 5.0	110.004
4,1 X 2.0	110.005
4,1 X 3.0	110.006
4,1 X 4.0	110.007
4,1 X 5.0	110.008
5,0 X 2.0	110.009
5,0 X 3.0	110.010
5,0 X 4.0	110.011
5,0 X 5.0	110.012

DIVERGENTE

TAMANHOS	MOD. CÓD.
3.3 X 2.0	110.049
3.3 X 3.0	110.050
3.3 X 4.0	110.051
4.1 X 2.0	110.054
4.1 X 3.0	110.055
4.1 X 4.0	110.056
4.1 X 5.0	110.057
5.0 X 2.0	110.059
5.0 X 3.0	110.070

HEX. 2.70

TAMANHOS	MOD. CÓD.
5.0 X 2.0	110.069

- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

TRANSFER MOLDEIRA
HEXÁGONO EXTERNO

ABERTA

TAMANHOS	MOD. CÓD.
Ø 3.3	108.204
Ø 4.1	108.205
Ø 5.0	108.206



FECHADA

TAMANHOS	MOD. CÓD.
Ø 3.3	108.201
Ø 4.1	108.202
Ø 5.0	108.203

COVER HEXÁGONO
EXTERNO

- Chave Sextavada de 0.9
- Torque máximo indicado: 10 Ncm



DESCRIÇÃO	MOD.COD.
COVER HE 3.3	110.205
COVER HE 4.1	110.207

PARAFUSO HEXÁGONO
EXTERNO

- Chave Sextavada de 1.2
- Chave Quadrada de 1.3
- Torque máximo indicado: 32 Ncm



PARAFUSO	Ø DA ROSCA	MOD. CÓD.
SEXTAVADO	Ø 1.8	102.001
SEXTAVADO	Ø 2.0	102.002
SEXTAVADO	Ø 2.5	102.003
QUADRADO	Ø 1.8	102.006
QUADRADO	Ø 2.0	102.007



UCLA CO-CR HEXÁGONO EXTERNO



INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
3.3 Rotacional	103.030
3.3 Anti Rotacional	103.033
4.1 Rotacional	103.031
4.1 Anti Rotacional	103.034
5.0 Anti Rotacional Hex. 2.7	103.100

UCLA CALCINÁVEL HEXÁGONO EXTERNO



INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm (após fundição)**

DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
3.3 Rotacional	103.201
3.3 Anti Rotacional	103.200
4.1 Rotacional	103.205
4.1 Anti Rotacional	103.204
5.0 Rotacional Hex. 2.7	103.207
5.0 Anti Rotacional Hex. 3.3	103.206

UCLA EM TITÂNIO HEXÁGONO EXTERNO



INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem sem parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. Cód.
3.3 Rotacional	103.001
3.3 Anti Rotacional	103.006
4.1 Rotacional	103.003
4.1 Anti Rotacional	103.008
5.0 Rotacional Hex. 2.7	103.005
5.0 Anti Rotacional Hex. 3.3	103.010



MINI PILAR ANGULADO HEXÁGONO EXTERNO



INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Embalagem com parafuso
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**

Angulação 17°

TAMANHOS	MOD. CÔD.
3.3 x 2.0mm	114.016
3.3 x 3.0mm	114.017
4.1 x 2.0mm	114.019
4.1 x 3.0mm	114.020
4.1 x 4.0mm	114.021
5.0 x 2.0mm	114.022
5.0 x 3.0mm	114.023
5.0 x 4.0mm	114.024

Angulação 30°

TAMANHOS	MOD. CÔD.
3.3 x 3.0mm	114.025
3.3 x 4.0mm	114.026
4.1 x 3.0mm	114.027
4.1 x 4.0mm	114.028
4.1 x 5.0mm	114.041
5.0 x 3.0mm	114.029
5.0 x 4.0mm	114.030

ANÁLOGO MINI PILAR



DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
ANÁLOGO MINI PILAR	101.006

CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

MODELO	MOD. CÔD.
CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR	115.001

CILINDROS



DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO	109.004
CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO	109.045
CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO	109.014

- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

MINI PILAR HEXÁGONO EXTERNO



INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

TAMANHOS	MOD. CÔD.
3.3 x 1.0	107.001
3.3 x 2.0	107.002
3.3 x 3.0	107.003
3.3 x 4.0	107.004
3.3 x 5.0	107.005
4.1 x 1.0	107.006
4.1 x 2.0	107.007
4.1 x 3.0	107.008
4.1 x 4.0	107.026
4.1 x 5.0	107.027
5.0 x 1.0	107.033
5.0 x 2.0	107.034
5.0 x 3.0	107.035
5.0 x 4.0	107.036

TRANSFER MINI PILAR




- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR	108.207


DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR	108.208



KITS SINGULAR

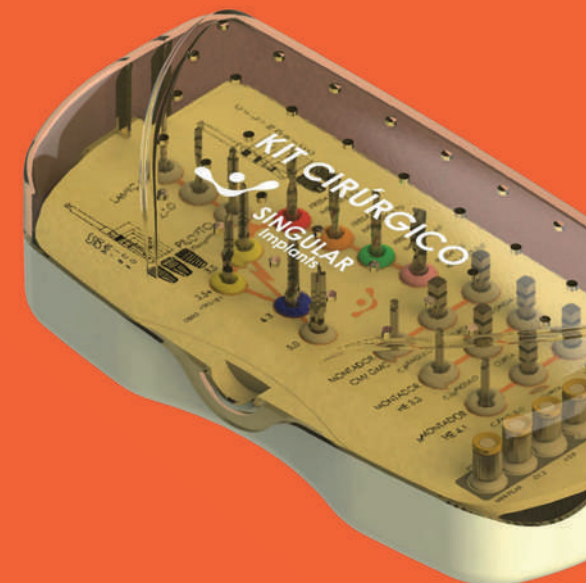

KIT CIRÚRGICO IMPLANTE

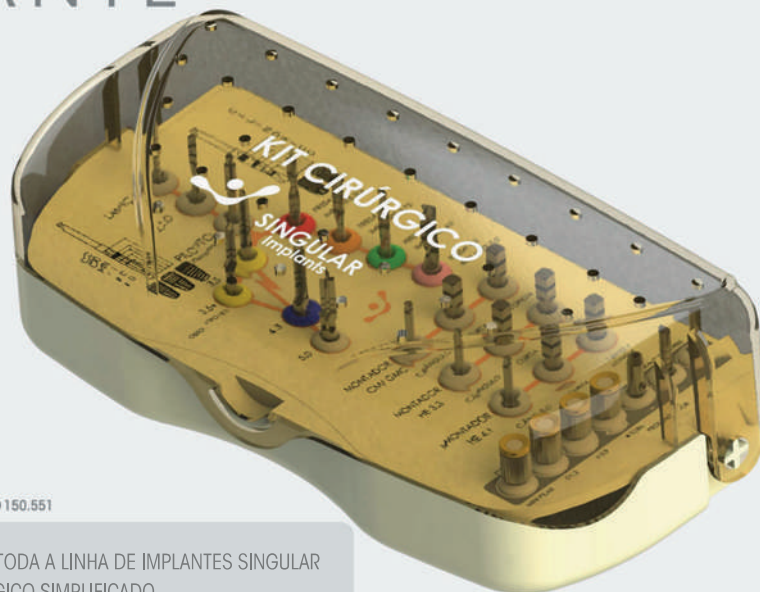


KIT CIRÚRGICO SINGULAR - CÓDIGO 150.551

- PARA INSTALAÇÃO DE TODA A LINHA DE IMPLANTES SINGULAR
- INSTRUMENTAL CIRÚRGICO SIMPLIFICADO
- PARA TODOS OS TIPOS DE OSSOS

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
PARALELIZADOR	122.010
BROCA HELICOIDAL 2.0	150.001
BROCA HELICOIDAL 2.8	150.002
BROCA HELICOIDAL 3.0	150.003
BROCA HELICOIDAL 3.3	150.005
BROCA HELICOIDAL 4.3	150.008
BROCA LANÇA 2.0	150.022
BROCA PILOTO 2/3	150.157
BROCA CÔNICA 3.5	150.120
BROCA CÔNICA 4.3	150.121
BROCA CÔNICA 5.0	150.122
EXTRATOR DE MUCOSA 1 GUIDE	150.180
MONTADOR CM N	117.090
MONTADOR HE 3.3	117.091
MONTADOR HE 4.1	117.093
CHAVE CATRACA HE 4.1 CURTA	150.205
CHAVE CATRACA HE 4.1 LONGA	150.206
CHAVE CATRACA HE 3.3 CURTA	150.211
CHAVE CATRACA HE 3.3 LONGA	150.212
CHAVE CATRACA CM CURTA	150.202
CHAVE CATRACA CM LONGA	150.199
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9MM CURTA	117.114
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2MM CURTA	117.010
CHAVE DIGITAL TORK CURTA	117.313
CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA	117.135
CHAVES TORQUIMETRO	117.140
SONDA MILIMETRADA	122.005
BROCA CÔNICA 3.5 MAX	150.172
ESTOJO CIRÚRGICO	160.000



KIT CIRÚRGICO SMART

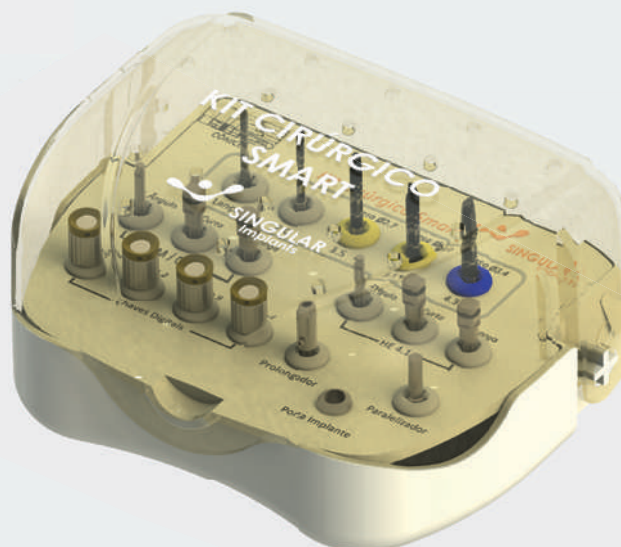

KIT CIRÚRGICO SMART - CÓDIGO 150.555

- INDICADO PARA INSTALAÇÃO DE IMPLANTES SINGULAR IMPLANTS DOS TIPOS CÔNICO, GODIRECT E HYBRIDUS®
- PODE SER USADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM TIPOS ÓSSEOS III E IV

DESCRIÇÃO	MOD. CÔD.
BROCA CÔNICA 3,5	150.120
BROCA CÔNICA 3,5 MAX	150.172
BROCA CÔNICA 4,3	150.121
BROCA HELICOIDAL 2,0	150.001
BROCA LANÇA 2,0	150.022
CHAVE CATRACA CM CURTA	150.202
CHAVE CATRACA CM LONGA	150.199
CHAVE CATRACA HE 4,1 CURTA	150.205
CHAVE CATRACA HE 4,1 LONGA	150.206
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9 CURTA	117.114
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2 CURTA	117.010
CHAVE DIGITAL TORK CURTA	117.313
CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE CURTA	117.002
CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA	117.140
ESTOJO CIRÚRGICO SMART	160.100
EXTRATOR DE MUCOSA 1 GUIDE	150.180
MONTADOR CM N	117.090
MONTADOR HE 4,1	117.093
PARALELIZADOR	122.010
SONDA MILIMETRADA	122.005



KIT PROTÉTICO SINGULAR



KIT PROTÉTICO SINGULAR - CÓDIGO: 150.600

- PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE COMPONENTES PROTÉTICOS
- INSTRUMENTAL PROTÉTICO SIMPLIFICADO E VERSÁTIL
- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL

DESCRIÇÃO	MOD. CÓD.
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 0.9MM CURTA	117.008
CHAVE HEXAGONAL 0.9MM LONGA	117.300
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM CURTA	117.109
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM MÉDIA	117.037
CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM CURTA	117.018
CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM MÉDIA	117.019
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.6MM MÉDIA	117.040
CHAVE ADAPTAÇÃO PROTÉTICA	117.141
CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA	117.135
CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA	117.140
CHAVE TORQUE FENDA	117.306
CHAVE TORQUE FENDA O'RING	117.305
CHAVE TORK CURTA P/ TORQUIMETRO	117.310
CHAVE TORK MÉDIA P/ TORQUIMETRO	117.311





SUORTE TÉCNICO E MANUAIS DE INSTRUÇÃO



MANUAL DO
KIT PROTÉTICO



MANUAL DO
KIT CIRÚRGICO



TODOS MANUAIS
SINGULAR



FALE COM A
EQUIPE TÉCNICA





SINGULAR
Implants

 **DMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

Rua Eucaliptos, 36 - Pq. das Árvores Parnamirim/RN

Brasil | CEP 59154-265 | CNPJ 11.812.152/0001-05 | IE 20.229.596-6

Resp. Técnico: Dalton Matos Rodrigues - CRO nº 2627

Aut. Func. ANVISA/MS: 8.09840-5 - Indústria Brasileira

Instrução de uso disponível no nosso site.



0800 024 43 78

@singularimplants

singularimplants.com.br

