

RESINA DUAL DE ALTA CARGA
E CIMENTO RECONSTRUTOR



ParaCore®

Confiança que se constrói desde a base

 **COLTENE**



Confiança que se constrói desde a base

ParaBond + ParaCore, a solução confiável para substituto dentinário.

Com ParaCore + ParaBond da COLTENE o preenchimento das cavidades profundas e a elevação de margens profundas alcançam um novo nível de confiabilidade. Seus sistemas de polimerização dual (Auto/Foto) garantem uma polimerização completa incluindo as cavidades profundas ou com acesso insuficiente de luz, superando as limitações da fotopolimerização convencional.

ParaBond®

Sistema adesivo de polimerização química
Adesão sem depender da luz



• Polimerização total, incluindo em profundidade

Por ser um sistema de polimerização dual (Auto/Foto) garante uma polimerização completa até o fundo da cavidade, onde a intensidade da luz não penetra.

• Vedação de interface superior

Minimiza a sensibilidade pós-operatória e o risco de micro infiltração, obtendo-se uma vedação confiável da dentina, mesmo em áreas sombreadas por matrizes ou paredes da cavidade.

• Compatibilidade universal

Compatibilidade com todos os cimentos duais graças a seu Ph.

ParaCore® Resina de alta carga e polimerização dual (Auto/Foto) Estabilidade, resistência e controle

• **Polimerização garantida**, polimerização dual (Auto/Foto) para maior eficiência clínica. Ela retém substâncias químicas nas zonas mais profundas, enquanto as camadas superficiais podem ser foto ativadas para acelerar o processo.

• Tixotropia excepcional

Com aplicação precisa e estável, o material não escorre nem se desloca antes da polimerização, permitindo a modelagem precisa da margem profunda.

• Monobloco funcional

Utilizado em combinação com o ParaBond, cria uma interface de adesão contínua e forte entre a dentina e o material restaurador, aumentando a previsibilidade da restauração.

• Propriedades similares a dentina natural

Graças ao seu reforço de vidro e radiopacidade, oferece propriedades mecânicas semelhantes à dentina (ideal para substituto da dentina).

Maior segurança
Maior controle
Resultados confiáveis



Elevação de margem profundo. Cavidades > 6 mm



Restauração defeituosa.



Adequação da cavidade.



Adaptação da matriz para elevação da margem proximal.



Após o condicionamento com ácido fosfórico, aplique ativamente o ParaBond sem enxágue.

ParaCore

a eleição segura
para substituto
dentinário

Indicado também como




cimentação
de pinos



reconstrução
de munhão



cimentação coroas,
pontes, inlays e onlays

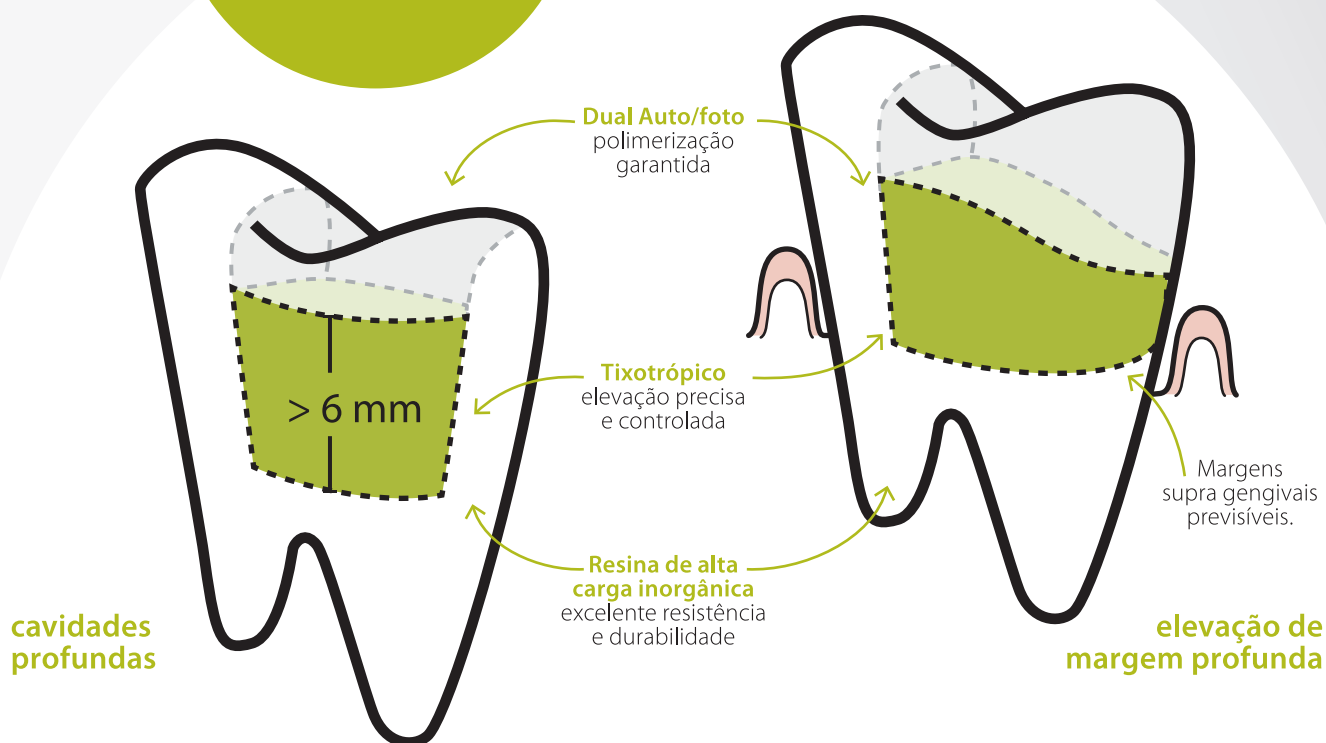

ParaCore garante a polimerização adequada em cavidades profundas e margens, assegurando desempenho clínico confiável mesmo em áreas críticas. Isso aprimora a qualidade dos meus procedimentos, otimiza meus tempos operatórios e, graças à sua grande versatilidade, torna-se uma solução indispensável para diversas indicações restauradoras. Eu utilizo na minha prática diária e recomendo fortemente a todos os meus colegas.

Dr. Eliseo Chun. DDS, MSc.

Imagens cedidas por Dr. Eliseo Chun



Aplicação ativa de ParaBond
Adesivo A&B.



Reconstrução e elevação de margem
profunda na proximal com ParaCore.



Preparação no conceito de adesivo
conservador.



Cimentação final com ParaCore da res-
tauração parcial indireta realizada com
BRILLIANT EverGlow

ParaCore • 4 em 1



substituto dentinário



cimentação
de pinos




reconstrução
de munhão



cimentação
de coroas, pontes,
inlays e onlays

Informação para pedidos

ParaCore seringa de 5 ml resina dual de alta carga

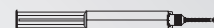

5885	ParaCore Intro Kit	5890EM	ParaCore Welcome Kit	60011391	ParaCore 5 ml Dentin SLOW Refill
1 × 5 ml	ParaCore Dentin	1 × 5 ml	ParaCore Dentin	2 × 5 ml	ParaCore Dentin SLOW
1 × 5 ml	ParaCore White	3 × 3 ml	ParaBond Non-Rinse	20 ×	Mixing Tip Short Super Fine
1 × 5 ml	ParaCore Dentin SLOW		Conditioner + Adhesive A & B		
1 × 5 ml	ParaCore Trans SLOW	20 ×	Mixing Tip Short Super Fine	60011392	ParaCore 5 ml Trans SLOW Refill
3 × 3 ml	ParaBond Non-Rinse			2 × 5 ml	ParaCore Trans SLOW
	Conditioner + Adhesive A & B	5886	ParaCore 5 ml White Rell	20 ×	Mixing Tip Short Super Fine
20 ×	Mixing Tip Short Super Fine	2 × 5 ml	ParaCore White		
		20 ×	Mixing Tip Short Super Fine	6747	Mixing Tip Short Super Fine
60013753	ParaCore SLOW Intro Kit			40 ×	Mixing Tip, Ø 1 mm
2 × 5 ml	ParaCore Dentin SLOW	5887	ParaCore 5 ml Dentin Rell		
2 × 5 ml	ParaCore Trans SLOW	2 × 5 ml	ParaCore Dentin	6759	Mixing Tip Short Fine
3 × 3 ml	ParaBond Non-Rinse	20 ×	Mixing Tip Short Super Fine	40 ×	Mixing Tip, Ø 1.8 mm
	Conditioner + Adhesive A & B				
20 ×	Mixing Tip Short Super Fine				

ParaBond sistema adesivo com acondicionador e polimerização química



7486	ParaBond Adhesive	7493	ParaBond Adhesive A & B Refill	7494	ParaBond Non-Rinse Conditioner Refill
1 × 3 ml	ParaBond Non-Rinse				
	Conditioner	1 × 3 ml	ParaBond Adhesive A	1 × 3 ml	ParaBond Non-Rinse
1 × 3 ml	ParaBond Adhesive A	1 × 3 ml	ParaBond Adhesive B		Conditioner
1 × 3 ml	ParaBond Adhesive B				

Kit para Substituto Dentinário

5890EM	ParaCore Welcome Kit
1 × 5 ml	ParaCore Dentin
3 × 3 ml	ParaBond Non-Rinse
	Conditioner + Adhesive A & B
20 ×	Mixing Tip Short Super Fine
5885	BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 × 2.3 g	Resina bulk + Mixing Tip
5885	BRILLIANT EverGlow
1 × 4 g	Resina submicrônica



© 0226 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Suíza
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/EE. UU.
Tel. + 1 330 916 8800
Fax + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

COLTENE