



Ref.:6727N

* Professor Doutor Associado da disciplina de Prótese Fixa da Univ. Cidade de São Paulo UNICID, e Professor Responsável pelo Módulo de Prótese Fixa do curso de Pós-Graduação (Mestrado) - SÃO LEOPOLDO MANDIC - CAMPINAS - Campinas.

** Professor Titular da disciplina de Prótese Dentária da Univ. Cidade de São Paulo UNICID, e Professor Titular Responsável pelo curso de Pós-Graduação em Prótese Dentária (Mestrado) - SÃO LEOPOLDO MANDIC - CAMPINAS - Campinas.

*** Professor Doutor Associado da disciplina de Prótese Fixa da Univ. Cidade de São Paulo UNICID, e Professor Responsável pelo Módulo de Oclusão do Curso de Pós-Graduação (Mestrado) - SÃO LEOPOLDO MANDIC - CAMPINAS - Campinas.

**** Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent., V. 55, N. 6, Pag. 431- 436, Nov./Dez. 2001

Occulsion Module for the post-graduate program (master) at SÃO LEOPOLDO MANDIC - in Campinas.

**** Magazine Assoc. Paul. Cir. Dent., V. 55, N. 6, Pag. 431- 436, Nov./Dez. 2001

Kit para prótese Parcial Fija "Inoue / Zanetti / Feltrin"

Este kit de puntas diamantadas fue idealizado para ejecutar todos los preparos en P.P. fija, desde restauraciones estéticas-"Metal Free"(Inlay/onlay, Faceta Laminada, Corona Hueca), hasta coronas parciales (MOD, 4/5) y coronas totales (Metálica, Veneer, metalocerámica).

Esta técnica de preparo está fundamentada en la conservación de la estructura de los dientes con muy poco desgaste, pero lo suficiente para la confección de restauraciones que suman, estética y un correcto perfil de emergencia.

Esta técnica se denomina "Nueva Técnica de Referencia para Preparos Dentales Denominada Inoue & Zanetti****", donde las puntas diamantadas fueron desarrolladas de forma secuencial pudiendo seleccionarlas según el espesor del desgaste deseado.

En este Kit (Inoue/Zanetti/Feltrin), también son presentadas puntas diamantadas de granulación fina y extrafina de formas variadas, apropiadas para acabados y variados tipos de terminaciones marginales en preparos dentarios modernos.

*Profesor Doctor asociado de la asignatura de prótesis fija de la Universidade Cidade de São Paulo - UNICID y Profesor Responsable por el módulo de Prótesis fija del curso de posgrado (Máster) SÃO LEOPOLDO MANDIC - Campinas.

**Profesor Titular de la asignatura de prótesis dentaria de la Universidade Cidade de São Paulo - UNICID y Profesor titular Responsable por el curso de Posgrado en prótesis dentaria (Máster) SÃO LEOPOLDO MANDIC - Campinas.

***Profesor Doctor asociado de la asignatura de prótesis fija de la Universidade Cidade de São Paulo - UNICID y Profesor Responsable por el módulo de oclusión del curso de Posgrado (Máster) SÃO LEOPOLDO MANDIC - Campinas.

**** Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent., V. 55, N. 6, Pag. 431- 436, Nov./Dez. 2001

KG SORENSEN

Medical Burs Indústria e Comércio de Pontas e Brocas Cirúrgicas Ltda.
Rua Tumas Siqueira, 522A - Colina - SP - CEP 06711-270
CNPJ 08.420.515/0001-15 - Indústria Brasileira - Made in Brazil
SAC 4777-1061 - e-mail: sac@kgsorensen.com.br
Resp. Técnico / Resp. Técnico / Resp. Técnico:
Cristiano R. dos Santos - CRF SP 30045

KIT

PRÓTESE PARCIAL FIXA

Inoue/Zanetti/Feltrin

PARTIAL FIXED PROSTHESIS PRÓTESE PARCIAL Fija

Composição: Diamantes e aço inoxidável.
Produto não perecível.

EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003
MDD 93/42



CE REPRESENTATIVE:

Zenith Dental ApS
Byggetøjsgade 8 - 6534 Ågerskov, Denmark
Tel.: +45 74 83 34 04 / Fax.: +45 74 83 32 04
E-mail: mail@zenith-dental.dk

EC

REP

Prof. Dr. Ricardo Tatsuo Inoue*
Prof. Dr. Artemio Luiz Zanetti**
Prof. Dr. Pedro Paulo Feltrin***

sac@kgsorensen.com.br

www.kgsorensen.com.br

M.S.80520430001

Kit para Prótese Parcial Fija "Inoue / Zanetti / Feltrin"

Este Kit de pontas diamantadas foi elaborado para realizar todos os tipos de preparos em P.P. Fixa, desde restaurações estéticas "Metal Free" (Inlay/Onlay, Faceta Laminada, Coroa Oca), às coroas parciais (MOD, 4/5) e coroas totais (Metálica, Veneer, Metalocerâmica).

A técnica de preparo preconizada fundamenta-se na preservação da estrutura dental com mínimo de desgaste, mas o suficiente para a confecção de restaurações que apresentem estética aliada a um correto perfil de emergência. Esta técnica é denominada "Nova Técnica de Referência para Preparos Dentais Denominada Inoue & Zanetti" ****, onde as pontas diamantadas foram desenvolvidas de forma sequencial, podendo selecioná-las de acordo com a espessura de desgaste desejada.

Neste Kit (Inoue/Zanetti/Feltrin), também são apresentadas pontas diamantadas de granulação fina e extrafina com formas diversas, apropriadas para acabamentos e vários tipos de terminações marginais

Kit for Partial Fixed Prosthesis "Inoue / Zanetti / Feltrin"

This diamond point kit was made for doing all kinds of preparations for Partial Fixed Prosthesis, going from metal free esthetic restorations (inlay/onlay, laminated facet, empty crown), partial crowns (MOD, 4/5) and complete crowns (metal, veneer, metal-ceramic).

The most highly recommended preparation technique is based on preserving the dental structure with a minimum of consuming, but with enough consuming for the confection of restorations that are esthetically pleasing together with a correct emergency profile. This technique is called "New Technique of Reference for Dental Preparations Named Inoue & Zanetti****", where diamond points are developed in a sequential manner and are able to be selected according to the desired consuming thickness.

In this kit (Inoue/Zanetti/Feltrin) there are also diamond points with fine and extra-fine granulation in differing kinds, being suitable for finishes and several types of edge terminations that are highly recommended in modern dental preparations.

*Associate Doctor Professor of Fixed Prosthesis at the Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID) and professor in charge of the Fixed Prosthesis Module for the post-graduate program (master) at SÃO LEOPOLDO MANDIC - in Campinas.

**Head Professor in Dental Prosthesis at the Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID) and Head Professor in charge of the post-graduate program in dental prosthesis (master) at SÃO LEOPOLDO MANDIC - in Campinas.

***Associate Doctor Professor of Fixed Prosthesis at the Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID) and professor in charge of the


Indicação de uso / Use indication / Indicaciones de uso

1,5mm Ø

2,1mm Ø

3139

Tronco - Cônica
Trunk - Conical
Tronco - Cônica

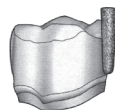

Planificação e Desgaste Axial

Planifforming and Axial Wear


Amplanamiento y Desgaste axial

0,9mm Ø

1,6mm Ø

2135


Tronco - Cônica
Trunk - Conical
Tronco - Cônica

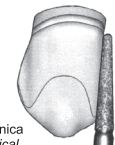

1,2mm Ø

3145

Cilíndrica
Cylindrical
Cilíndrica

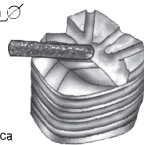

Sulcos de Orientação Desgaste Oclusal / Incisal


Guides Grooves Occlusal / Incisal Wear


Surcos de Orientación Desgaste Oclusal / Incisal

1,4mm Ø


3146

Cilíndrica
Cylindrical
Cilíndrica

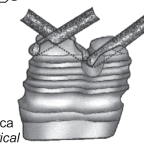


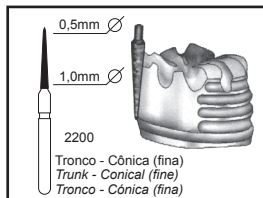


Desgaste Proximal
Proximal Wear
Desgaste Proximal

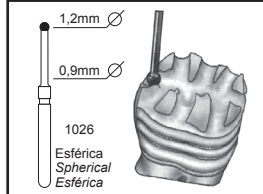

Desgaste Lingual Dentes Anteriores
Tongue Wear Front Teeth
Desgaste Lingual Dientes Anteriores

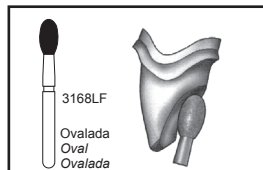


Incisivos Superiores,
Inferiores e Caninos
Inferiores
Upper Incisors
Lower Incisors and
Lower Canines
Incisivos Superiores,
Inferiores y Caninos
Inferiores

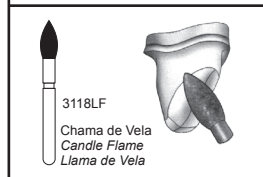


Caninos Superiores
Upper Canines
Caninos Superiores

Sistema Auxiliar de Retenção / Estabilidade
Retention / Stability Support System
Sistema Auxiliar de Retención / Estabilidad

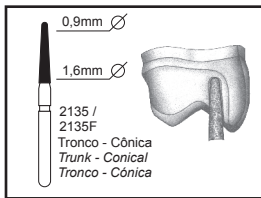


Sulcos
Grooves
Surcos


Terminações Marginais
Edges Terminations
Terminaciones Marginales

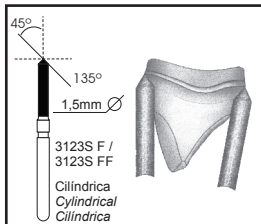


Degrau inclinado
135° (45°)
Slanted degree
135° (45°)
Escalañ inclinado
135° (45°)

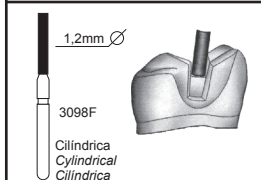

Ombro / Degrau
Shoulder / Degree
Hombro / Escalañ

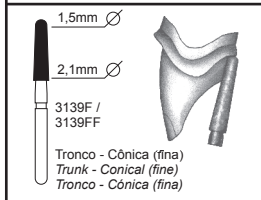


Chanfro Profundo /
Degrau Arredondado
Deep Chamfer /
Rounded Chanfer
Chafán Profundo /
Escalañ Redondeado

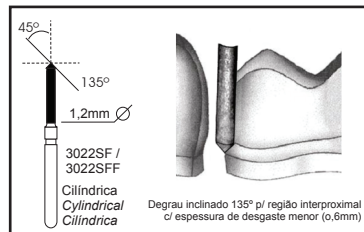

Degrau inclinado 135° p/ região interproximal
cl espessura de desgaste menor (0,6mm)



Sulcos de Orientação Axial Cervical e Horizontais
Axial, Cervical and Horizontal Guide Grooves
Surcos de Orientación Axial Cervical y Horizontales

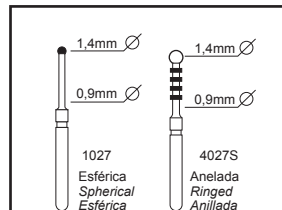

Profundidade do sulco:
 $\frac{1.4 - 0.9}{2} = 0.25\text{mm}$

Groove depth:
 $\frac{1.4 - 0.9}{2} = 0.25\text{mm}$



Profundidad del surco:
 $\frac{1.4 - 0.9}{2} = 0.25\text{mm}$

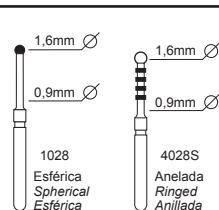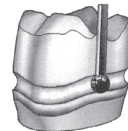


Profundidade do sulco:
 $\frac{1.6 - 0.9}{2} = 0.35\text{mm}$

Groove depth:
 $\frac{1.6 - 0.9}{2} = 0.35\text{mm}$

Profundidad del surco:
 $\frac{1.6 - 0.9}{2} = 0.35\text{mm}$

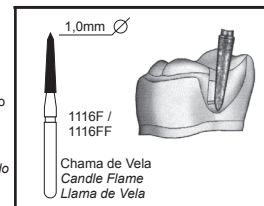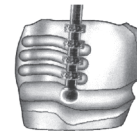

Chanfro simples
Single chanfer
Chafán Simple

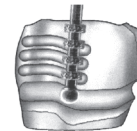

Profundidade do sulco:
 $\frac{1.8 - 0.9}{2} = 0.45\text{mm}$

Groove depth:
 $\frac{1.8 - 0.9}{2} = 0.45\text{mm}$

Profundidad del surco:
 $\frac{1.8 - 0.9}{2} = 0.45\text{mm}$

